






Medicinen nära till hands, exempelvis på nyckelknippan

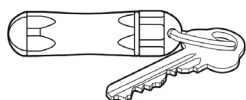


Inuti aluminiumröret finns ett innerrör, där tablettorna förvaras

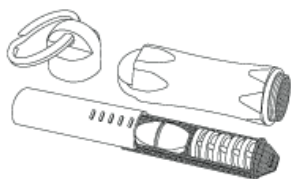

På innerörets lock finns räfflor som gör att det lätt kan skjutas undan

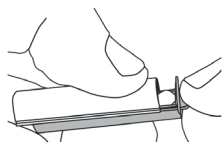

Ungefär tio mindre eller två större tabletter får plats i röret

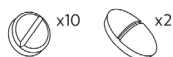

INGRID Med Tablettrör

Ingrid Med Tablettrör ser till att medicinen alltid finns nära till hands.

Det går till exempel att fästa tablettröret på nyckelknippan, eller att ha det i handväskan.

Anodiserat aluminiumrör i flera färger

Tabletterna förvaras i ett innerrör av plast, som i sin tur omges av ett vattentätt yterrör i aluminium. Aluminiumröret är anodiserat både in- och utvändigt, vilket gör det tätt och repfritt. Röret finns i färgerna silver, svart, blå, röd och guld.

Innerrör av plast

Plaströret, som tablettorna ligger i, består av en undersida och ett lock. Locket är försett med räfflor, vilket gör att det enkelt kan skjutas undan med tummen för att nå medicinen.

Längst fram på plaströret finns också en liten pigg, med vars hjälp det dras ut ur yterröret. Tabletterna ska inte förvaras direkt i aluminiumröret, utan alltid i plaströret.

Plaströret går att diska i diskmaskin. Det plockas isär genom att locket dras ut maximalt tills det lossnar från undersidan. Röret sätts sedan samman igen genom att lock och undersida läggs ovanpå varandra och trycks ihop, så att ett klick hörs.

Tio mindre eller två större tabletter

I tablettröret kan antingen cirka 10 mindre tabletter eller två större tabletter förvaras. De större tablettorna kan ha en maximal längd på 18 mm och en maximal diameter/bredd på 8 mm. Även de mindre tablettorna har en maximal diameter på 8 mm.

Ingrid Med Tablettrör är inte framtagen för mediciner som används vid akuta livshotande tillstånd. Texten på förpackningen betonar därför att man inte ska förlita sig ensidigt på tablettröret om man har mediciner som är direkt livsavgörande.